



Manual de Instalación

ECLIPSE-T v3.0 · Ecosistema OLYMPUS

Versión	3.0 — Julio 2026
Centro	CESFAM Cerrillos de Tamaya
Profesional	Dr. Nicolás Vargas Mella — Médico Familiar
Servicio	Servicio de Salud Coquimbo
Soporte	n.vargas.med@gmail.com

Contenido del paquete de instalación

Archivo	Descripción	Tamaño
HEFESTOS.exe	Instalador y configurador del centro	~23 MB
ECLIPSE-T.exe	Aplicación principal de registros clínicos	~229 MB
HELIOS.exe	Historial de laboratorio (HELIOS)	~54 MB
large-v3-turbo.pt	Modelo de voz HERMES — transcripción offline	~950 MB
LEEME_PRIMERO.txt	Instrucciones rápidas de primer uso	—
LICENCIA.txt	Contrato de licencia de uso (acepta al instalar)	—
claves_*.txt	Claves de activación asignadas al centro	—

✓ El modelo de voz large-v3-turbo.pt (~950 MB) viene en el pendrive. HEFESTOS lo detecta junto a los ejecutables y lo deja listo sin descargar nada. Manténgalo siempre en la misma carpeta que ECLIPSE-T.exe.

✓ HEFESTOS instala Firefox automáticamente via winget si no está presente. No es necesario instalarlo previamente.

■ Método recomendado: copie los 4 archivos (HEFESTOS.exe, ECLIPSE-T.exe, HELIOS.exe y large-v3-turbo.pt) a una carpeta del equipo nuevo y ejecute HEFESTOS desde ahí. HEFESTOS detecta la carpeta automáticamente; si no, use el botón '...'.

1. Primera instalación con HEFESTOS

HEFESTOS es el instalador del ecosistema OLYMPUS. Solo debe ejecutarse una vez por equipo para activar y configurar el centro de salud. Detecta automáticamente los componentes ya presentes y descarga únicamente los que faltan.

1

Ejecutar HEFESTOS.exe

- Doble clic en HEFESTOS.exe dentro de la carpeta del paquete.
- Si Windows muestra 'protegió su PC': haga clic en Más información → Ejecutar de todas formas.
- La ventana de HEFESTOS aparecerá con la interfaz de pilares dorados.
- HEFESTOS detecta automáticamente la carpeta — verifique que la ruta sea correcta.

2


Ingresar la clave de activación

- En la pantalla de inicio, ingrese la clave de activación recibida.
- Haga clic en Activar. HEFESTOS verificará la clave en línea (requiere internet).
- Cada clave es de un solo uso y queda vinculada a este equipo.

3

Configurar el centro de salud

- Complete el formulario con los datos del centro:
- Nombre del centro · Código DEIS · Servicio de Salud · Profesional responsable.
- Seleccione el conector de laboratorio (IRIS o RedClínica) e ingrese credenciales.
- Cargue hasta 2 logos PNG/JPG para los documentos (opcional).

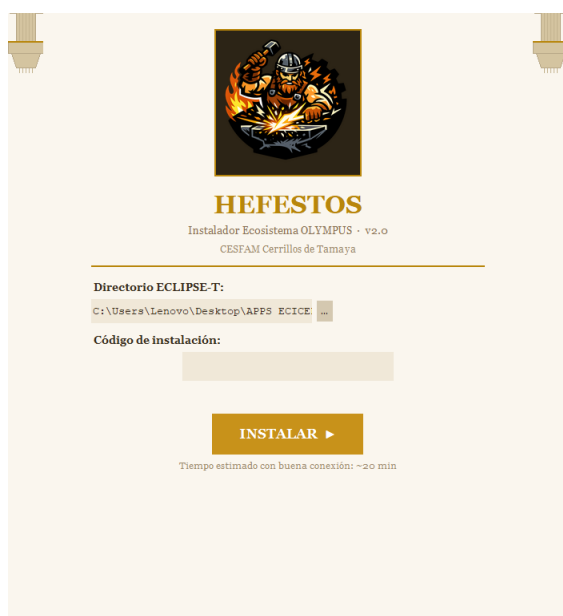

Pantalla de inicio — clave de activación


La imagen muestra la interfaz de usuario de HEFESTOS en su pantalla de configuración del centro de salud. El título es 'Configurar Centro de Salud' con el subtítulo 'Esta información se usará en todos los documentos generados por ECLIPSE-T'. El formulario está dividido en varias secciones: 'Identidad del Centro' con campos para 'Nombre del centro' (CESFAM Cerrillos de Tamaya), 'Código DEIS', 'Comuna' (Ovalle) y 'Servicio de Salud' (Servicio de Salud Coquimbo); 'Laboratorio (HELIOS)' con opciones de 'Tipo' (IRIS (red local), Red Clínica (internet), Sin laboratorio), campos para 'URL IRIS', 'Usuario IRIS', 'Contraseña', 'URL RedClínica', 'Usuario RedClínica' y 'Contraseña'; 'Profesional Responsable' con campos para 'Nombre' (Dr. Nicolás Vargas), 'Profesión' (Médico Familiar) y 'Registro'; y 'Logos (máx. 2, opcional)' con un mensaje 'Si no elige ninguno se usará el logo del Dr. Vargas.' y campos para 'Logo principal' y 'Logo secundario'. En la parte inferior, hay dos botones: 'Omitir por ahora' y 'Guardar y continuar ►'.

Pantalla de configuración del centro

4

Instalación automática de componentes

- HEFESTOS verifica si ECLIPSE-T.exe, HELIOS.exe y el modelo de voz ya están en la carpeta.
- Los componentes presentes se marcan con ✓ verde — no se descargan de nuevo.
- Si el pendrive incluye large-v3-turbo.pt (~950 MB), HEFESTOS lo detecta y no descarga nada.
- Si el modelo no está, HEFESTOS lo descarga por internet (~809 MB, sólo la primera vez).
- Firefox se instala automáticamente via winget si no está en el sistema.
- geckodriver y el vocabulario médico HERMES también se configuran en este paso.
- Una barra de progreso muestra el estado de cada componente.

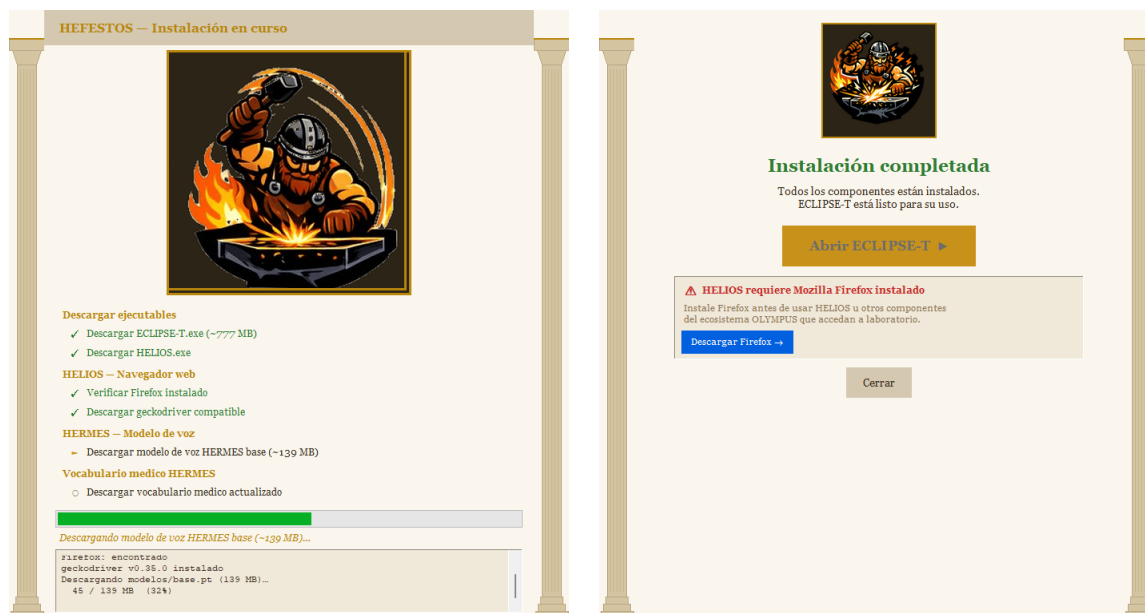

Pantalla de instalación — componentes presentes
marcados con ✓

Pantalla final — instalación completada

5

Aceptar Términos y Condiciones

- Al finalizar, aparecerá el contrato de licencia completo.
- Léalo y haga clic en Acepto para continuar.
- El archivo LICENCIA.txt en esta carpeta contiene el texto completo.

6

Abrir ECLIPSE-T

- Haga clic en el botón Abrir ECLIPSE-T.
- En usos posteriores, ejecute directamente ECLIPSE-T.exe.
- No es necesario volver a ejecutar HEFESTOS a menos que cambie de equipo o centro.

■ HERMES funciona 100% offline una vez instalado. El modelo de voz (large-v3-turbo.pt) viaja en el pendrive y HEFESTOS lo deja junto a ECLIPSE-T.exe — no se requiere internet en el uso diario.

2. Uso diario de ECLIPSE-T

En el día a día ejecute directamente ECLIPSE-T.exe. No es necesario volver a usar HEFESTOS.

- 1

Iniciar la aplicación
 - Doble clic en ECLIPSE-T.exe.
 - Seleccione el profesional que atenderá.
 - La pantalla principal muestra las 5 pestañas: Preingreso · Ingreso · PCIC · Control · Satélite.
- 2

Cargar o crear sesión de paciente
 - En la pestaña Preingreso, ingrese el RUT del paciente.
 - Puede cargar datos desde AVIS pegando el texto o arrastrando el PDF de la HCE.
 - Los signos vitales y antecedentes se pre-llenan automáticamente.
- 3

Registrar la atención
 - Ingreso: anamnesis, examen físico, diagnósticos CIE-10, receta.
 - PCIC: plan de cuidado integral con dimensiones biopsicosociales.
 - Control: seguimiento ECICEP — solo registra lo que cambió.
 - Satélite: escalas clínicas (PHQ-9, AUDIT, Barthel, Yesavage...), derivaciones.
- 4

Exportar a AVIS
 - Haga clic en Guardar / Generar PDF al finalizar la atención.
 - El PDF se genera en formato texto compatible con AVIS (Courier, sin imágenes).
 - Abra AVIS en Firefox, vaya a la ficha del paciente y adjunte el documento generado.

HERMES — Transcripción de voz (opcional)

HERMES transcribe la consulta médica en tiempo real y popula los campos clínicos automáticamente. Funciona 100% offline una vez instalado el modelo.

Acción	Detalle
Activar HERMES	Clic en el botón HERMES (■) en la barra superior de ECLIPSE-T
Consentimiento	Leer el texto de privacidad al paciente antes de activar el audio
Iniciar grabación	Clic en botón verde en el panel HERMES flotante
Ver transcripción	El texto aparece en tiempo real en cada campo clínico correspondiente
Corregir errores	Edite el texto directamente — el sistema aprende la corrección
Privacidad	El audio solo existe en RAM; nunca se guarda en disco ni se transmite

3. HELIOS — Historial de laboratorio

HELIOS descarga el historial de exámenes del paciente desde el sistema de laboratorio del Servicio de Salud (IRIS o RedClínica).

1

Acceder a HELIOS

- Desde ECLIPSE-T: pestaña Preingreso → botón Historial Lab (HELIOS).
- O bien ejecute directamente helios.exe desde la carpeta del paquete.

2

Buscar por RUT

- Ingrese el RUT del paciente (con guion y dígito verificador).
- Haga clic en Buscar. HELIOS se conectará al sistema de laboratorio.
- Se descargan automáticamente los exámenes informados más recientes.

3

Revisar el historial

- Los resultados se muestran en tabla comparativa T0→T6 (más reciente primero).
- Valores fuera de rango aparecen marcados en rojo.
- Los datos quedan disponibles en la sesión de ECLIPSE-T.

■ HELIOS requiere conexión de red al sistema de laboratorio: red local del CESFAM para IRIS, o internet para RedClínica. Los resultados quedan en caché local para consulta offline posterior.

4. Preguntas frecuentes

■ ¿Windows Defender bloquea el ejecutable?

Clic derecho en el .exe → Propiedades → marque 'Desbloquear' → Aceptar. Si persiste, agréguelo como excepción en Windows Security.

■ ¿Necesito instalar Firefox antes de usar HEFESTOS?

No. HEFESTOS instala Firefox automáticamente via winget (Windows 10/11) si no está presente. Solo se requiere conexión a internet durante la instalación.

■ ¿Necesito internet para usar ECLIPSE-T?

No. ECLIPSE-T funciona 100% offline. Solo HEFESTOS (primera instalación) y HELIOS (laboratorio en línea) requieren red.

■ ¿Dónde se guardan los registros clínicos?

En la carpeta 'Archivos_ECICEP' dentro de la carpeta de ECLIPSE-T, organizados por fecha. Los datos nunca salen del equipo local.

■ ¿Qué pasa si cierro ECLIPSE sin guardar?

ECLIPSE guarda automáticamente al cambiar de pestaña. Aun así, se recomienda hacer clic en Guardar antes de cerrar.

■ ¿Cómo actualizo ECLIPSE-T?

Reemplace ECLIPSE-T.exe por la nueva versión. La configuración y los datos existentes se conservan.

■ HERMES no reconoce el micrófono

Use el botón ■ en el panel HERMES para probar (grabación de 2 s). Verifique que el micrófono sea el dispositivo predeterminado en Windows.

■ HEFESTOS no detecta la carpeta de instalación

Haga clic en el botón '...' junto al campo de directorio y seleccione manualmente la carpeta donde están ECLIPSE-T.exe y helios.exe.

Dr. Nicolás Vargas · n.vargas.med@gmail.com

Centro CESFAM Cerrillos de Tamaya — Ovalle, Coquimbo

Versión ECLIPSE-T v3.0 · HERMES v3.0 · HELIOS v3.0 · HEFESTOS v2.2

Fecha Julio 2026
